

Illico

Elektricky polohovací lůžko pro
domácí i profesionální péči.



VERMEIREN
we care for you

Illico

Komfortní a praktické pečovatelské lůžko

- elektrické nastavení pomocí dálkového ovladače
 - výšky roštu matrace: 298 mm až 828 mm
 - hlavové části
 - stehenního segmentu (segment lýtek lze nastavit manuálně)
- velikost matrace 900 mm x 2000 mm
- dálkové ovládání s funkcí zámku
- maximální zatížení 135 kg
- dva páry bočnic
- tyč pro patientskou hrazdu lze umístit vlevo nebo vpravo
- každé ze 4 kol lze samostatně uzamknout
- různá provedení bočnic a čel
- snadná (de)montáž bez použití nářadí




Dálkový ovladač s funkcemi zámku



Snadná (de)montáž bočnic a čel



Robustní kolečka s brzdou

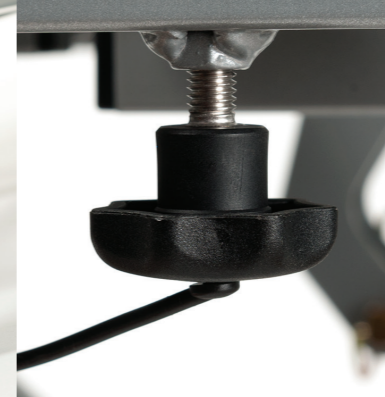


Velké šrouby pro snadnou (de)montáž



Přepravní sada na kolečkách pro snadné skladování



Snadné rozložení lůžka bez potřeby nářadí

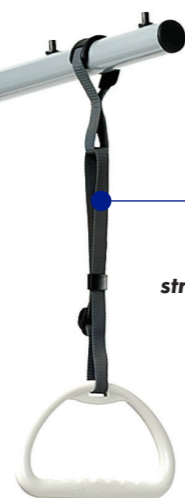

Tyč pro patientskou hrazdu lze umístit na levé nebo pravé straně lůžka. Popruh lze nastavit na požadovanou výšku.



4 polohovací zarážky matrace (2 v hlavové části a 2 v nožní části) udržují matraci v dokonalé poloze.

Jediným stisknutím tlačítka dojde k uvolnění bočnic.



Dálkové ovládání disponuje dlouhým prodlužovacím kabelem, aby jej bylo možné umístit kdekoli na lůžko.

Segment lýtek lze manuálně zvednout do požadované polohy.



SNADNÁ (de)montáž bez potřeby nářadí

S lůžkem Illico již nebudete hledat šroubováky či imbusové klíče. Montáž či demontáž tohoto lůžka zvládne jedna osoba, a to během několika minut. Sundejte bočnice, čela, odpojte rám lůžka a máte hotovo.



Různá čela, různé bočnice

Postel Illico lze vybavit oxidovými nebo bukovými deskami.



Rošt lůžka je dostupný také v **plastovém provedení** pro snadnou dezinfekci.



Dělenébočnílišťy

Naše postele Illico jsou k dispozici také s dělenými bočnicemi, a to buď kovovými nebo dřevěnými, v závislosti na konfiguraci.



Produkty navržené pro vás

VERMEIREN se vždy snaží přijít s nejlepším možným řešením, které zajistí vaše osobní potřeby. Stejně tak, jak postupuje technologický pokrok, i my se vám snažíme nabídnout ty nejnovější produkty. Toto je výsledek našeho nepřetržitého výzkumu a zkušeností od roku 1957.

Garance kvality

Co se týká kvality, **Illico** splňuje nejvyšší normy stanovené světově uznávanými certifikovanými zkušebními ústavami.

Technické údaje

■ Celková šířka	1024 mm
■ Celková výška	783 - 1313 mm
■ Celková délka	2080 mm
■ Výška podpěry matrace (bez matrace)	298 - 828 mm
■ Max. úhel zádové sekce	70°
■ Max. úhel stehenní sekce	36,8°

■ Max. úhel lýtkové sekce	-17,2°
■ Maximální zátěž na hrazdu	75 kg
■ Hmotnost	85 kg
■ Maximální hmotnost uživatele	135 kg
■ Doplnující informace	CE

Rozměry jsou uvedeny v mm, hmotnosti v kg - Tolerance měření: ± 15 mm / 1,5 kg.
Technické změny vyhrazeny. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Některé funkce mohou být volitelné.

VERMEIREN ČR s.r.o.

Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
Česká republika

www.vermeiren.cz
info@vermeiren.cz



Pro více informací prosím kontaktujte svého prodejce.